



## DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY REANIBEX 100

Defibrylator treningowy Reanibex100 Trainer umożliwia prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED.

---

**Kod produktu:** DEF-247

**2,100,00 zł z VAT, 1,707,32 zł netto**

### Opis

Defibrylator treningowy Reanibex100 Trainer umożliwia prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED. Symuluje wygląd i działanie defibrylatora zewnętrznego Reanibex 100. Urządzenie odwzorowuje wygląd defibrylatora ratowniczego, ale nie dostarcza energii podczas symulowanego wstrząsu. Posiada cztery wgrane scenariusze pozwalające na naukę udzielania pomocy w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia a także możliwość tworzenia własnego scenariusza w czasie rzeczywistym, z poziomu aplikacji.

### Nowoczesne narzędzie do efektywnego szkolenia z AED

Reanibex 100 Trainer posiada bardzo intuicyjny interfejs oraz czytelne instrukcje dla użytkownika – tak samo jak jego kliniczny odpowiednik. Podczas użycia urządzenia odwzorowane zostały wszystkie funkcje takie jak zmiana trybu na pediatryczny, asystent RKO w czasie rzeczywistym oraz metronom.



Instruktor dysponuje możliwością skorzystania z czterech zaprogramowanych scenariuszy, a także z opcji „nieskończony scenariusz”, w którym z poziomu aplikacji decyduje w czasie rzeczywistym o przebiegu działań. Instruktor może skorzystać m.in. z opcji: wyboru rytmu, aktywacji/dezaktywacji metronomu, wyboru wskazówek asystenta RKO, problemów technicznych z urządzeniem.

Dzięki regulacji głośności urządzenia oraz dobremu głośnikowi – komunikaty są wyraźne i dobrze słyszalne. Nawet podczas pracy w otoczeniu o znacznym poziomie hałasu – użytkownicy nie powinni mieć problemów z usłyszeniem komunikatów głosowych.

Prosty system wymiany elektrod, umożliwia sprawną podmiannę uszkodzonych elektrod bez konieczności odpinania wtyczki z urządzenia. Wymieniane są same elektrody, bez wtyczki i przewodu

### Aplikacja Reanibex 100 Trainer App

Aplikacja daje możliwość konfiguracji urządzenia w szerokim zakresie. Instruktor może decydować o wielu parametrach i łatwo dostosować istotne funkcje. Korzystanie z aplikacji jest bardzo intuicyjne i łatwe dla użytkownika natychmiast po rozpoczęciu pracy.

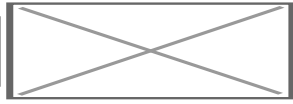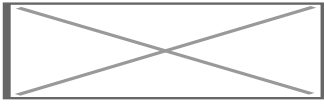

### **Skład zestawu**

- Defibrylator treningowy
- Elektrody szkoleniowe
- Kabel do elektrod
- Instrukcja obsługi
- Baterie

### **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

#### **Producent**

Osatu, S .Coop.

Edificio Zearrekobuelta

Subida de Areitio Nº 5

48260 Ermua (Bizkaia)

Hiszpania

+34 943 17 02 20

info@bexencardio.com

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Producent**

Osatu, S .Coop. Edificio Zearrekobuelta Subida de Areitio Nº 5 48260 Ermua (Bizkaia) Hiszpania +34 943 17 02 20  
info@bexencardio.com