

OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY KLOTPAD Z-FOLD



KLOTPAD to militarny opatrunek hemostatyczny w formie gazy o wymiarach 7.5 cm x 3.7 m w wodoodpornym opakowaniu. Wysokie stężenie kaolinu gwarantuje skuteczne działanie nawet wobec masywnych krwotoków.

Kod produktu: KLOTPAD MILITARY Z-FOLD

GTIN: 8800034300181

Kod produktu: RT-050

GTIN: 8800034300181

169,00 zł z VAT, 156,48 zł netto

Opis


KLOTPAD to militarny opatrunek hemostatyczny o wysokim stężeniu na bazie **kaolinu o wymiarach 7.5 cm x 3.7 m**. Kaolin to naturalnie występujący minerał nieorganiczny, który wspomaga naturalny proces krzepnięcia krwi w organizmie, powodując szybki efekt hemostatyczny. Składnik kaolinowy, który wspomaga proces hemostazy nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i jest klinicznie bezpieczną substancją - nie powoduje gorączki, alergii, niepożądanych reakcji czy też reakcji nadwrażliwości.

Cechy produktu

- efekt hemostazy uzyskuje się poprzez ręczny nacisk na krwawiące miejsce, a KLOTPAD przyspiesza krzepnięcie w ciągu kilku minut po aplikacji
- nie zawiera skorupiaków ani białka zwierzęcego, dzięki czemu można go bezpiecznie stosować u pacjentów z alergiami
- całkowicie wysuszony materiał włókninowy ma doskonałą chłonność krwi. Generuje mniej pyłu niż zwykła gaza bawełniana, co może zmniejszyć częstość występowania zanieczyszczeń w wyniku kontaktu z kurzem
- w przeciwieństwie do gazy hemostatycznej na bazie chitosanu, jest bezpieczny dla reakcji immunologicznych białek zwierzęcych i nie wytwarza nieprzyjemnego zapachu podczas stosowania
- KLOTPAD jest skuteczny w przypadku szerokiego zakresu krwotoków lub krwotoków tętnicznych, w przeciwieństwie do konwencjonalnego hemostazy chłonnej
- linie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich są przymocowane do powierzchni produktu i można je łatwo zidentyfikować na zdjęciu rentgenowskim, co ułatwia ich usunięcie po hemostazie
- sterylne opakowanie zapewnia pełną sterylność, chyba że opakowanie zostanie otwarte lub uszkodzone. Przy stosowaniu nie ma ryzyka zakażenia krzyżowego

- międzynarodowa instrukcja użytkowania w formie czytelnych piktogramów na opakowaniu

Jak stosować KLOTPAD?

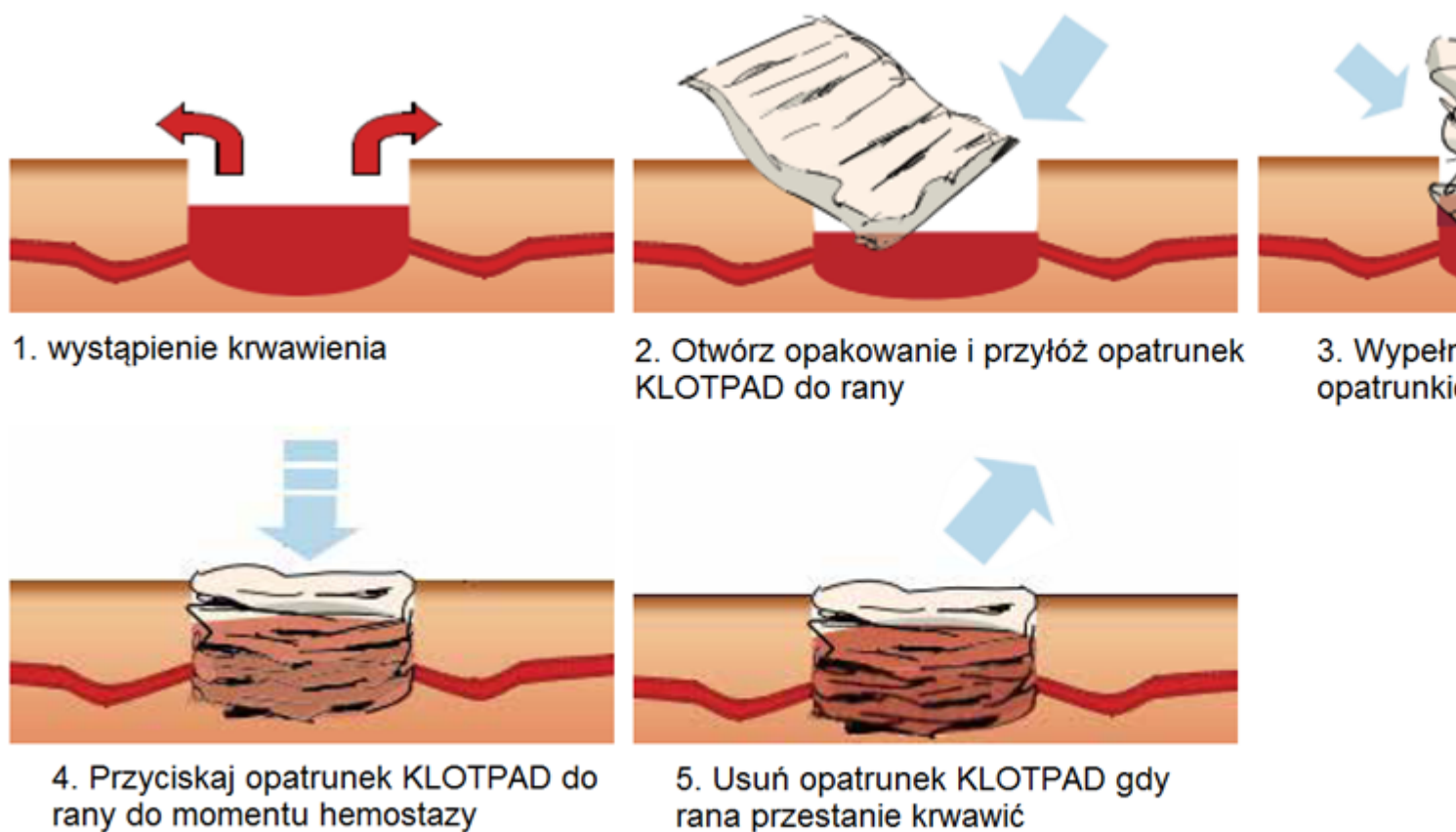

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

KIWOOM MEDICS, Republika Korei

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

JaviTech e.K., Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

KIWOOM MEDICS, Republika Korei