

ZESTAW - FANTOM OSOBY DOROSŁEJ Z DIODAMI LED PRESTAN ADULT + DEFIBRYLATOR XFT 120C+



Zestaw szkoleniowy składający się z fantoma PRESTAN osoby dorosłej z diodą LED oraz defibrylatora szkoleniowego XFT 120c+ w komplecie z 5 parami elektrod. Wyposażenie umożliwia prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy oraz obsługi AED.

Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ to sprawdzone urządzenie umożliwiające prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć treningowych z użyciem defibrylatora. Do jego głównych zalet należy możliwość wyboru aż 10 scenariuszy szkoleniowych, solidne wykonanie i bardzo atrakcyjna cena. W zestawie oferowany z 5 parami elektrod dla dzieci i dorosłych!

Kod produktu: FAN-048

1 890,00 zł z VAT, 1 536,59 zł netto

Opis

Fantom szkoleniowy Prestan Adult

Fantom szkoleniowy Prestan Adult to wiernie odwzorowany tors osoby dorosłej, dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED. To co sprawia, że amerykańska marka Prestan odniosła globalny sukces i cieszy się bardzo dobrą reputacją na całym świecie, to świetna jakość oferowanych produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Wszystkie fantomy Prestan cechuje wysoka jakość wykonania, precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka i ciekawe rozwiązania podwyższające jakość kształcenia i komfort prowadzenia zajęć.

Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantom szkoleniowy Prestan Adult posiada kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- wbudowany **wskaźnik świetlny** (kolorowe diody LED), który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Przy

każdym ucisku wykonanym przez kursanta, na torsie manekina zapala się odpowiednia lampka określająca jakość ostatniego ruchu

- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „**klik-klak**”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość 5 – 6 cm
- unikalny **mechanizm dostosowujący siłę ucisku** klatki piersiowej, który pozwala poczuć kursantowi odpowiedni opór, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji
- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (diody LED), słyszy (system “klik-klak”) i czuje (system oporowy)

Właściwości produktu w realizacji profesjonalnych szkoleń

Fantom Prestan daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała dorosłego człowieka, co sprawia, że zajęcia szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:


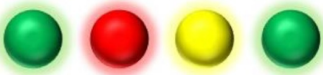






- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii dorosłego człowieka
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza, który daje możliwość nauki techniki udzielenia pomocy przy zadławieniu

Charakterystyka użytkowa

Prestan Adult to wysokiej jakości produkt szkoleniowy, który posiada **najdłuższą na rynku gwarancję** producencką wynoszącą **3 lata** od momentu zakupu (standardem dla podobnych produktów jest gwarancja na okres 2 lat). To co warto podkreślić, to również jego właściwości użytkowe. Manekin bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna. Ponadto, Prestan Adult jest kompaktowy i lekki, co ma znaczący wpływ na komfort przy jego transporcie. Do tego celu służy nam torba transportowa znajdująca się w zestawie z fantomem, która może być także wykorzystywana jako mata podczas szkoleń.

- masa produktu: 3,18 kg
- przybliżone wymiary: 18 x 36 x 58 cm
- gwarancja: 3 lata od momentu zakupu

Opis działania wskaźnika LED

Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia	
W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED	
Poniżej 60 ucisków na minutę	
Od 60 do 79 ucisków na minutę	
Od 80 do 99 ucisków na minutę	
Od 100 do 120 ucisków na minutę	
Powyżej 120 ucisków na minutę (żółta dioda miga)	
Przerwanie uciskania klatki piersiowej (czerwona dioda miga)	

Skład oferowanego zestawu

- fantom osoby dorosłej z diodami LED Prestan Adult
- 10 szt. wymiennych dróg oddechowych
- torba transportowa, która pełni także rolę maty ćwiczeniowej

Trenażer AED

Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ to sprawdzone urządzenie umożliwiające prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć treningowych z użyciem defibrylatora. Do jego głównych zalet należy możliwość wyboru aż 10 scenariuszy szkoleniowych, solidne wykonanie i bardzo atrakcyjna cena. W zestawie oferowany z 5 parami elektrod dla dzieci i dorosłych.

Charakterystyka produktu

- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- W zestawie 5 kompletów elektrod szkoleniowych: 3x komplety dla dorosłych oraz 2x komplety dla dzieci
- Zasilanie bateryjne lub przy użyciu zasilacza sieciowego
- Wgrane 10 scenariuszy szkoleniowych
- Scenariusze są zgodne z wytycznymi AHA i ERC
- Możliwość sterowania za pomocą dołączonego pilota

- Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w poręcznym etui
- Możliwość zmiany języka z polskiego na angielski

Skład zestawu

- trener XFT-120C+
- elektrody dla osób dorosłych - 3 sztuki
- elektrody pediatryczne - 2 sztuki
- zasilacz sieciowy
- kable do podłączenia elektrod
- pilot sterowania
- torba transportowa
- instrukcja obsługi w języku polskim

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Fantom osoby dorosłej Prestan Adult

Producent

PRESTAN Products, LLC
5101 Naiman Parkway,
Solon, OH 44139
Stany Zjednoczone
+1 800 434 7989
info@prestanproducts.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

PRESTAN Europe B.V.
Celsiusstraat 15
6003 DG Weert
Holandia
+31 495 76 01 55
info@prestaneurope.eu

Defibrylator szkoleniowy XFT-120C+

Producent

Shenzhen XFT Medical Limited
203 Building 1, Biomedicine Innovations Industrial Park,
#14 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen
Chiny
+86 755 2988 8818
xft@xft.cn

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MEDIS Ewelina Warzybok

Północna 145C

62-005 Promnice

Polska

+48 789 772 898

aed@reanibex.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.